

TRIANGO 100

PERFEKTE LEUCHE FÜR BEHANDLUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN



EINE BEHANDLUNGSLEUCHE NACH WUNSCH.

Der modulare Aufbau der TRIANGO 100 erlaubt Ihnen aus unterschiedlichen Ausführungen zu wählen. Entscheiden Sie selbst, welche Ausführung der TRIANGO 100 Ihre Anforderungen erfüllt.

Erleben Sie Swiss Engineering: Verpackt in einer Klein-OP-Leuchte in der unsere jahrelange Erfahrung in Lichttechnik und Ergonomie verschmelzen. Die TRIANGO 100 sorgt für beste Lichtbedingungen und ist ein perfekter Assistent für jeden Arzt – zum Wohle des Patienten.



TECHNISCHE
DATEN ONLINE

derungslicht.com

PRODUKT
VIDEOS



geeignet für
Labore, Arztpraxen,
Kliniken, etc.


**GEPRÜFTES
MEDIZINPRODUKT**

entspricht

EN 60601-1


Diamant-Cluster-Optik

Für homogenes Licht
mit 100 000 Lux @ 1.0 m

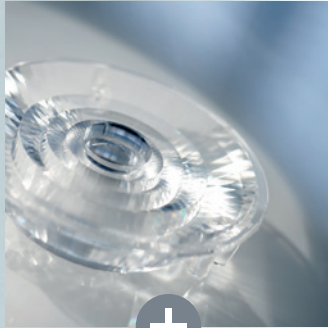


Einzigartiges Armsystem

Hohe Positionstreu und
grosser Aktionsradius

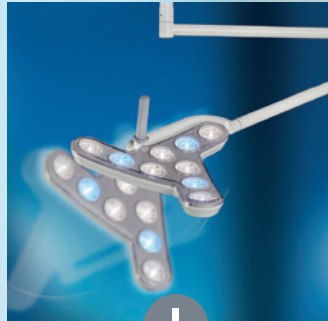


Intuitive Bedienung

Einfach und in Griffnähe über
Folientastatur bedienbar

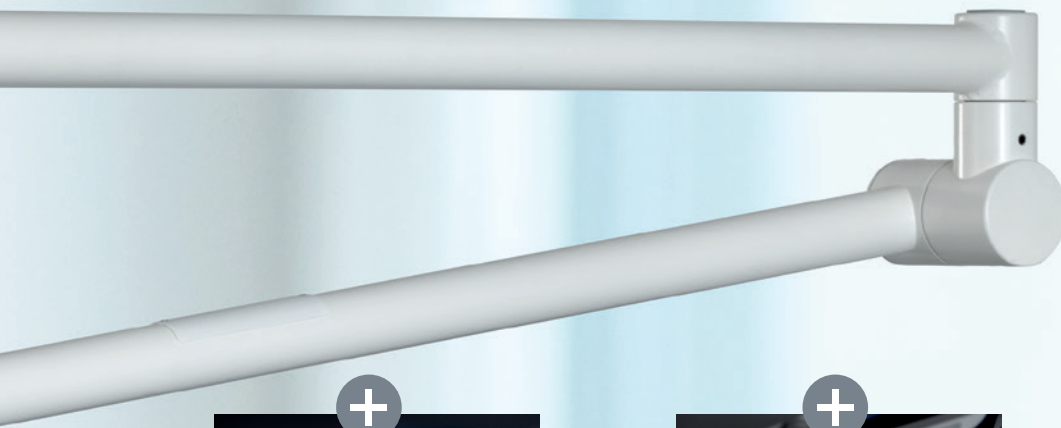


Ideale Farbtemperatur

Optional in drei Stufen einstellbar
(3 700 K / 4 300 K / 4 700 K)*

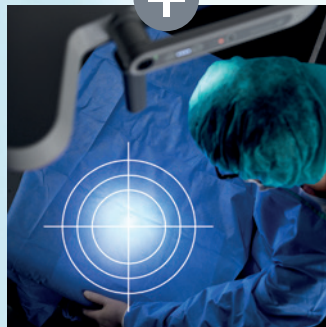

Fokussierbar *


Einstellbarer Lichtfeld-
durchmesser
zwischen Ø 18 und 28 cm

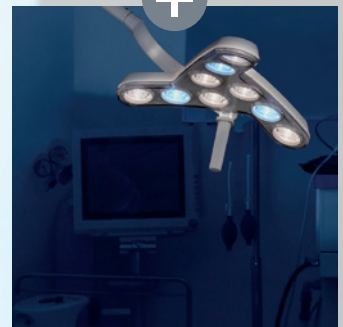


Endo-Modus *

Optimale Lichtbedingungen bei
endoskopischen und minimal-
invasiven Eingriffen

* optional

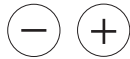

Modell	dimmbar	Farbwechsel	fokussierbar	Endo-Modus
TRIANGO 100 - 1	✘			
TRIANGO 100 - 3	✘	✘		
TRIANGO Fokus 100 - 1	✘		✘	
TRIANGO Fokus 100 - 3	✘	✘	✘	
TRIANGO Endo 100 - 1	✘			✘

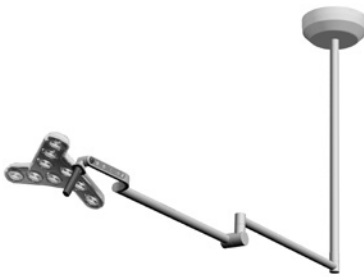

Deckenversion



Wandversion



Rollstativ

TRIANGO 100 Anwendungen

- Kliniken & Spitäler
- Praxen & Ärztezentren
- Tierkliniken
- Operative Dermatologie
- Endoskopie
- Notfallstationen
- Intensivstationen
- Minimalinvasive & ambulante Chirurgie
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Labore

TRIANGO 100 technisch

Beleuchtungsstärke **	100 000 Lux @ 1 m
Beleuchtungsfeld Ø **	Fix 18 cm Fokussierbar: 18 – 28 cm*
Dimmung **	4-stufig dimmbar
Farbtemperatur **	Fix 4 300 K Einstellbar: 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K*
Farbwiedergabe **	Ra = 95
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)
Handgriff	Sterilisierbarer Handgriff, optional Einwegüberzug

** -10% / +20% Toleranz

*optional

Stammsitz Deutschland

HERBERT WALDMANN GMBH & CO. KG

Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Telefon +49 7720 601-0
Telefon +49 7720 601-100 (Vertrieb)
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

Kompetenz-Center Pflege & Gesundheit:

DERUNGS LICHT AG

Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Schweiz
Telefon +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Die Derungs Licht AG ist ein
Unternehmen der Waldmann Group.

